

Trattamento M22™ VascuPlus

una soluzione per tutte le
condizioni vascolari



M22 è dotato della più ampia gamma di lunghezze d'onda per offrire un trattamento completo e risultati ottimali

- Universal IPL con tecnologia a impulso ottimale (OPT™) offre 4 filtri diversi per trattamenti vascolari: 515, 560, 590 nm e il filtro vascolare (filtro notch, 530-650 e 900-1200 nm), previsto specificatamente per trattamenti altamente selettivi di lesioni vascolari
- Multi-Spot™ Nd:YAG, 1064 nm, con Impulso multi-sequenziale (MSP™) – per opzione di trattamento più profondo fuori dal viso


Risultati clinici




Per gentile concessione del Dott. Matteo Tretti Clementoni



Per gentile concessione del Dott. Gilly Munavalli

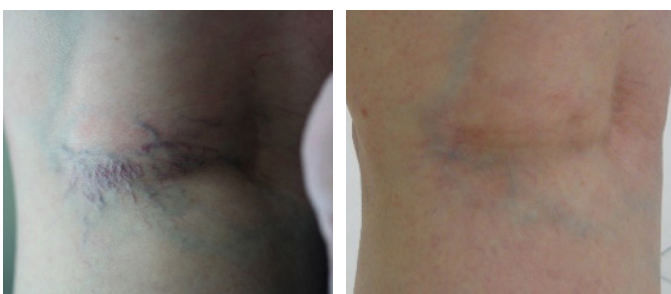


Per gentile concessione del Dott. Jose Miguel Montero Garcia

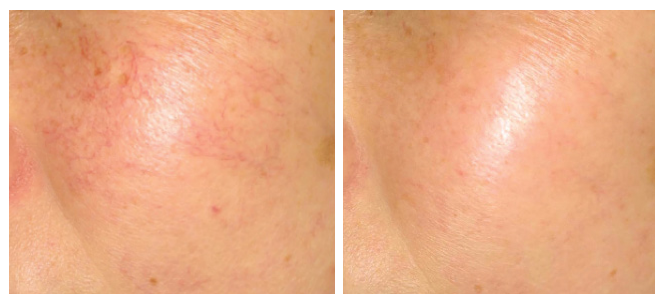

Per gentile concessione del Dott. Hiroki Kanda

I vantaggi di Lumenis OPT™

- Controlla la forma dell'impulso omogeneizzando la distribuzione di energia sull'intero impulso o su impulsi sequenziali
- Procedure più efficaci, più confortevoli e a misura di paziente con fluenze effettive inferiori
- Elevata potenza di picco, impulsi più brevi: ottimale per trattamenti cutanei IPL che utilizzano il fotoringiovanimento e il trattamento di lesioni pigmentate benigne

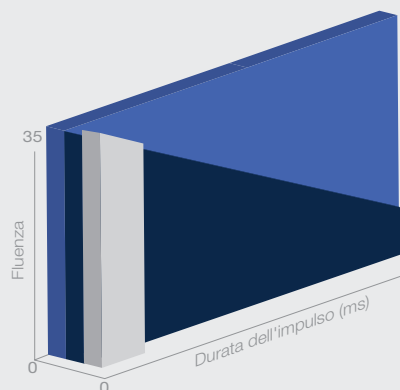

M22 IPL con OPT


IPL ad alta potenza senza OPT

Capacità limitate dei sistemi a potenza inferiore

Caratteristiche tecniche

Lunghezza d'onda	IPL	515, 560, 590 nm e Vascolare (530-650 e 900-1200 nm)
	Nd:YAG	1.064 nm
Fluenza	IPL	10-56 J/cm ²
	Nd:YAG	10-600 J/cm ²
Durata dell'impulso	IPL	4-20 ms
	Nd:YAG	2-20 ms
Ritardo dell'impulso	IPL	5-150 ms
	Nd:YAG	5-150 ms

Dimensione del punto	IPL	35 x 15 mm ² ; 15 x 8 mm ² ; 6 mm circolare
	Nd:YAG	1,5 mm; 2 x 4 mm ² ; 6 mm; 9 mm
Frequenza di ripetizione	Fino a 1 Hz	
Caratteristiche dell'impulso	Impulso multi-sequenziale	
Raffreddamento	Raffreddamento cutaneo continuo	

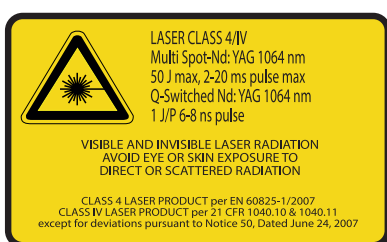

AMERICHE

San Jose, CA, USA
T +1 408 764 3000
+1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

EMEA

Dreieich Dreieichenhain, Germania
T +49 6103 8335 0
F +49 6103 8335 300
Roma (RM), Italia
T +39 06 90 75 230
F +39 06 90 75 269
Hertfordshire, Regno Unito
T +44 20 8736 4110
F +44 20 8736 4119

Giappone

Tokyo, Giappone
T +81 3 6743 8300
F +81 3 6743 8301

ASIA/PACIFICO

Pechino, Cina
T +86 10 5737 6677
Gurgaon, India
T +91 124 422 07 95
Kowloon, Hong Kong
T +852 217 428 00
F +852 272 251 51

© 2015 Tutti i diritti sono riservati. Gruppo the Lumenis Group of Companies. PB-2001376IT Rev B. Lumenis, il suo logo, M22, OPT, Multiple-Sequential Pulsing, i filtri ExpertFilters, le guide ottiche SapphireCool sono marchi o marchi registrati appartenenti a Lumenis Group of Companies. Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso. Lumenis è certificata ISO 13485:2012. M22 è approvato CE. | M22 è approvato dall'FDA.

Per ulteriori informazioni: www.lumenis.com